

# **FOUNTAIN® Sistema de Infusão**

---



## Distribuição dos Tamanhos dos Orifícios

Distribuição exclusiva dos tamanhos dos orifícios permite a infusão uniforme do agente terapêutico ao longo de todo o comprimento do segmento de infusão. Os orifícios são multiperfurados a laser para proporcionar um padrão de infusão superior através da aplicação em bomba de infusão contínua ou pela técnica de infusão pulsátil.

### Segmentos Mais Longos de Infusão

Ambos os produtos de 4F e 5F possuem segmento de infusão de 5 cm a 50 cm.

### Cateter

Compatível com fio guia 0.035" (0.89mm). Confeccionado para fornecer suporte necessário para boa navegação e fácil utilização.

### Guia Oclusivo


Bloqueia efetivamente o orifício da extremidade do cateter de modo que a terapia de infusão é dirigida para fora através dos orifícios laterais diretamente aos trombos.

### Válvula Hemostática

Válvula de grande calibre permite a inserção fácil do guia minimizando a perda de sangue do paciente. Rotator minimiza as bolhas.

### Válvula de Alívio de Alta Pressão

Projetada para que a injeção ocorra apenas pela seringa de infusão. Design único que proporciona melhor manuseio durante a pulsação.

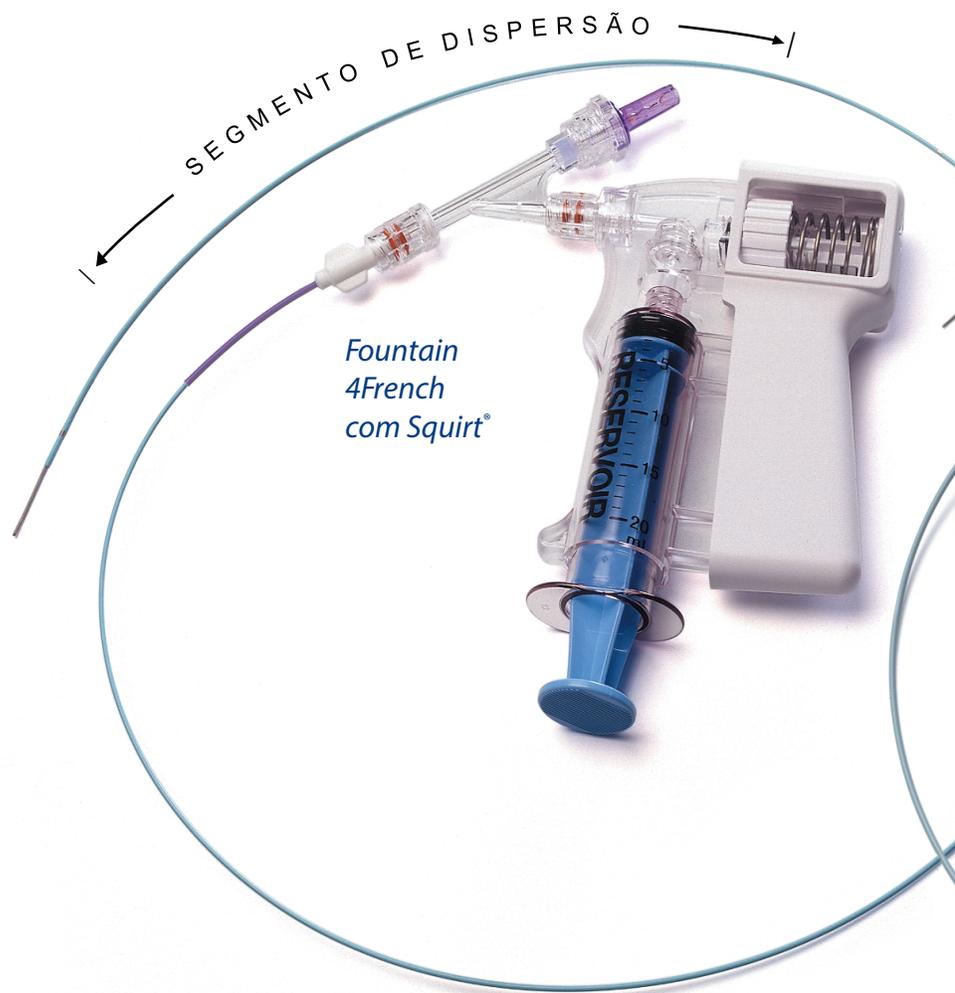

### 4F - Capa Protetora de Encaixe

A tampa na extremidade proximal do fio de oclusão encaixa na válvula hemostática garantindo o correto posicionamento do guia e segurança adicional para permanência de infusões durante longos períodos.


# FOUNTAIN®

## SISTEMA DE INFUSÃO

Fountain  
4French  
com Squirt®

O Sistema de Infusão Fountain™ de 4 French e 5 French estão disponíveis com Squirt™ ou com o Sistema de Infusão contendo a válvula de alívio de alta pressão e seringa de infusão. Ambos os sistemas possuem a válvula hemostática Merit Acess Plus e™ seringa de 20ml.

### Fountain

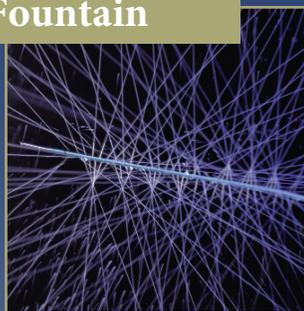

### Concorrente



Os cateteres dos competidores possuem orifícios laterais alinhados em quatro filas paralelas.



A capa protetora do guia protege a ponta proximal do guia ocluser e se encaixa na válvula hemostática.



Sistema de Entrega de Flúidos Squirt™

Consistente, forte e injeções pulsáteis.

**SISTEMA DE INFUSÃO FOUNTAIN® com  
SISTEMA DE ENTREGA SQUIRT®**

Código	French Size	Cateter Comprimento cm	Área de Infusão cm
FIS4-45-10SQ	4F	45	10
FIS4-45-20SQ	4F	45	20
FIS4-90-5SQ	4F	90	5
FIS4-90-10SQ	4F	90	10
FIS4-90-20SQ	4F	90	20
FIS4-90-30SQ	4F	90	30
FIS4-90-40SQ	4F	90	40
FIS4-90-50SQ	4F	90	50
FIS4-135-5SQ	4F	135	5
FIS4-135-10SQ	4F	135	10
FIS4-135-20SQ	4F	135	20
FIS4-135-30SQ	4F	135	30
FIS4-135-40SQ	4F	135	40
FIS4-135-50SQ	4F	135	50

FIS5-45-10SQ	5F	45	10
FIS5-45-20SQ	5F	45	20
FIS5-90-5SQ	5F	90	5
FIS5-90-10SQ	5F	90	10
FIS5-90-20SQ	5F	90	20
FIS5-90-30SQ	5F	90	30
FIS5-90-40SQ	5F	90	40
FIS5-90-50SQ	5F	90	50
FIS5-135-5SQ	5F	135	5
FIS5-135-10SQ	5F	135	10
FIS5-135-20SQ	5F	135	20
FIS5-135-30SQ	5F	135	30
FIS5-135-40SQ	5F	135	40
FIS5-135-50SQ	5F	135	50

Kit inclui cateter Fountain, guia ocluser, válvula hemostática AccessPLUS, sistema de entrega Squirt e seringa de 20ml. (Capa protetora do guia no 5F)

**CATETER, GUIA OCLUSOR e VÁLVULA  
HEMOSTÁTICA AccessPLUS®**

Código	French Size	Cateter Comprimento cm	Área de Infusão cm
IS4-45-10	4F	45	10
IS4-45-20	4F	45	20
IS4-90-5	4F	90	5
IS4-90-10	4F	90	10
IS4-90-20	4F	90	20
IS4-90-30	4F	90	30
IS4-90-40	4F	90	40
IS4-90-50	4F	90	50
IS4-135-5	4F	135	5
IS4-135-10	4F	135	10
IS4-135-20	4F	135	20
IS4-135-30	4F	135	30
IS4-135-40	4F	135	40
IS4-135-50	4F	135	50

IS5-45-10	5F	45	10
IS5-45-20	5F	45	20
IS5-90-5	5F	90	5
IS5-90-10	5F	90	10
IS5-90-20	5F	90	20
IS5-90-30	5F	90	30
IS5-90-40	5F	90	40
IS5-90-50	5F	90	50
IS5-135-5	5F	135	5
IS5-135-10	5F	135	10
IS5-135-20	5F	135	20
IS5-135-30	5F	135	30
IS5-135-40	5F	135	40
IS5-135-50	5F	135	50

(Capa protetora do guia no 5F)



**Sede**

Rua Dona Francisca nº 8.300 - Bloco 10  
Modulo E - Condomínio Perini Business Park  
CEP: 89219-600 - Joinville - SC  
Tel.: +55 47 3425-3720

**Vendas**

Rua Apeninos, 429 - 6º andar  
Conjuntos 601 e 602  
CEP: 01533-000 - São Paulo - SP  
Tel.: +55 11 4561-0062/0063

[www.merit.com](http://www.merit.com)

**Registro ANVISA 10256400020**